

DEVET

Superior Compacto Veterinario

Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido de Color Doppler
Rendimiento Excelente y Experiencia Avanzada para Animales



VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.

5F, A Building, No.27 Xinfu Rd, Suzhou Industrial Park, 215123, China

Tel: +86 512 62873806

Fax: +86 512 62873801

Email: vinno@vinno.com

Website: www.vinno.com

VINNO reserves the rights to revise the technical specification if needed.





VINNO D6-VET es una solución inteligente e integrada altamente. Cuenta con una estructura avanzada diseñada para proporcionar la portabilidad requerida por los profesionales veterinarios en diversas escenas. Se basa en la plataforma revolucionaria de RF para ofrecer informaciones abundantes e imágenes precisas. Proporciona a los usuarios un acceso conveniente y rápido a imágenes excepcionales, así como escaneo y análisis profesionales. Gracias al algoritmo de procesamiento de una cantidad de datos de RF, ofrece imágenes de contraste y resolución ultra altos. La plataforma también soporta la banda ancha digital de próxima generación de hasta 25MHz y formadores de haz de alta resolución, lo que proporciona un excelente rendimiento de procesamiento con una alta densidad de canales.




Plataforma Revolucionaria

La serie VINNO D6 VET se basa en una plataforma de datos innovadora y simplificada, que combina la integración de formación de haces tradicional con el front-end procesamiento de datos. Este flujo de trabajo innovador permite las operaciones convenientes, lo que lo convierte en una opción ideal para diversos escenarios.

Plataforma Revolucionaria de RF de Ultrasonido de VINNO

Plataforma de procesamiento de datos de señal de RF para una mejor resolución y definición

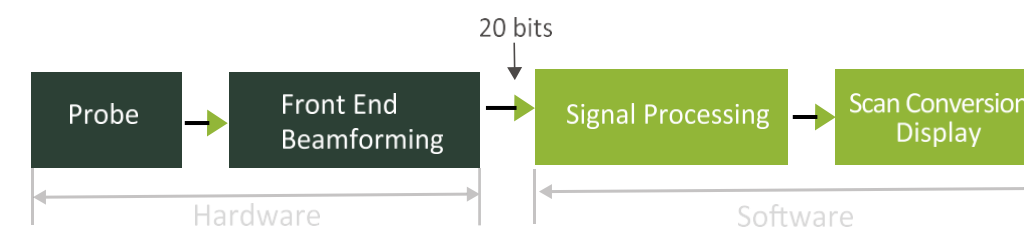

Rendimiento Superior de Imagen

Reducción de ruido de manchas(VSpeckle)

Basado en la plataforma de metadatos RF, integra los datos de detección obtenidos por el sistema para producir imágenes superiores con un contraste más altamente y límites claros.

Imágenes de fusión(VFusion)

Haces de sonido se emiten desde diferente direcciones, y los haces de sonido reflejados se combinan a través de potentes caoacidades de procesamiento para producir imágenes con una alta relación señal-ruido en la pantalla.

Una Opción de ahorrar el coste con alto rendimiento



LCD pantalla de ángulo amplio de 15.6 pulgadas



Amplio ángulo de visión de hasta 150 grados



Pantalla táctil de alta sensibilidad de 8 pulgadas que se puede operar con guantes estériles



Uno se puede ampliar a tres



Flujo de trabajo profesional y fluido con teclado suave incorporado y teclado externo facilita mucho al usuario la entrada de las informaciones.



Distribución de teclado razonable y conveniente hace la operación más fluida.

Equipado con un carro dedicado y portátil altamente

Facilita conmutación de dispositivos. Soporta hasta 3 conexiones de sonda. Soporta más sondas disponibles.

A Saint Bernard dog is sitting on the right side of the frame, looking towards the ultrasound machine. The machine is mounted on a white stand with a black base and four wheels. The dog is brown and white with its tongue out.


» **VGuide**

Tecnología de VGuide de VINNO es como ojo electrónico del médico para guiar la biopsia con precisión. La operación de punción anestésica se vuelve visible, fácil y precisa.




» VCQ Función

La función del corazón se evalúa automáticamente. Evalúa automáticamente el resultado de la medición cardíaca, indicando si está por encima o por debajo del valor normal.

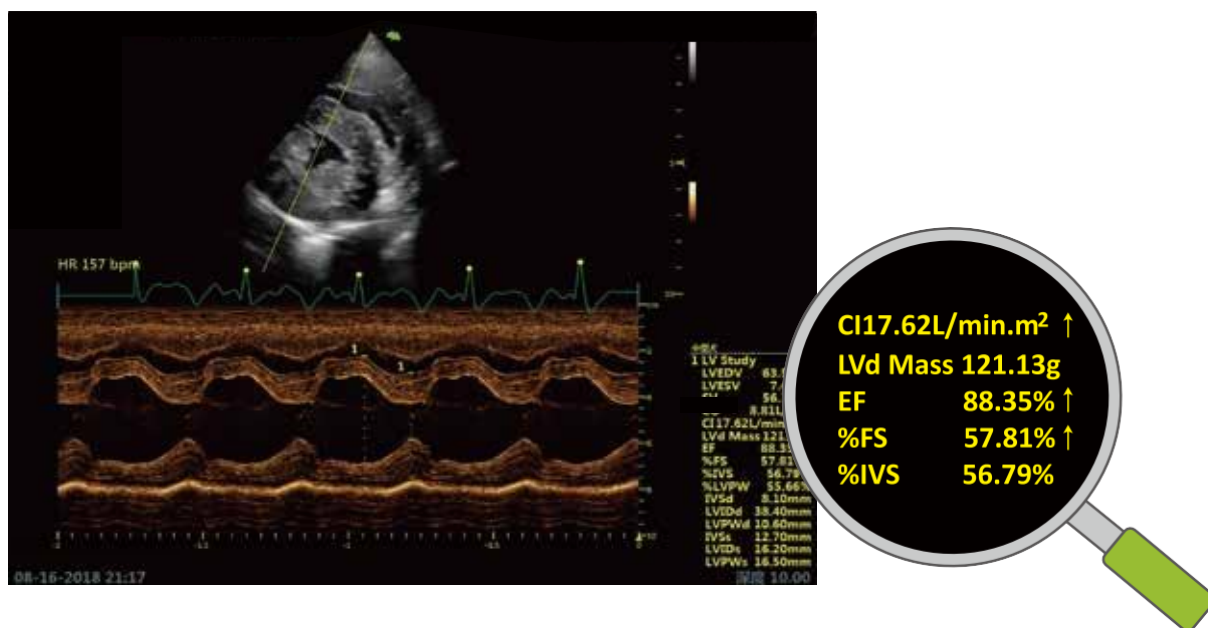


» Doppler de Onda Continua (CW)

Es capaz de capturar el haz de retorno de alta velocidad y proporciona un fuerte apoyo de para el diagnóstico clínico.

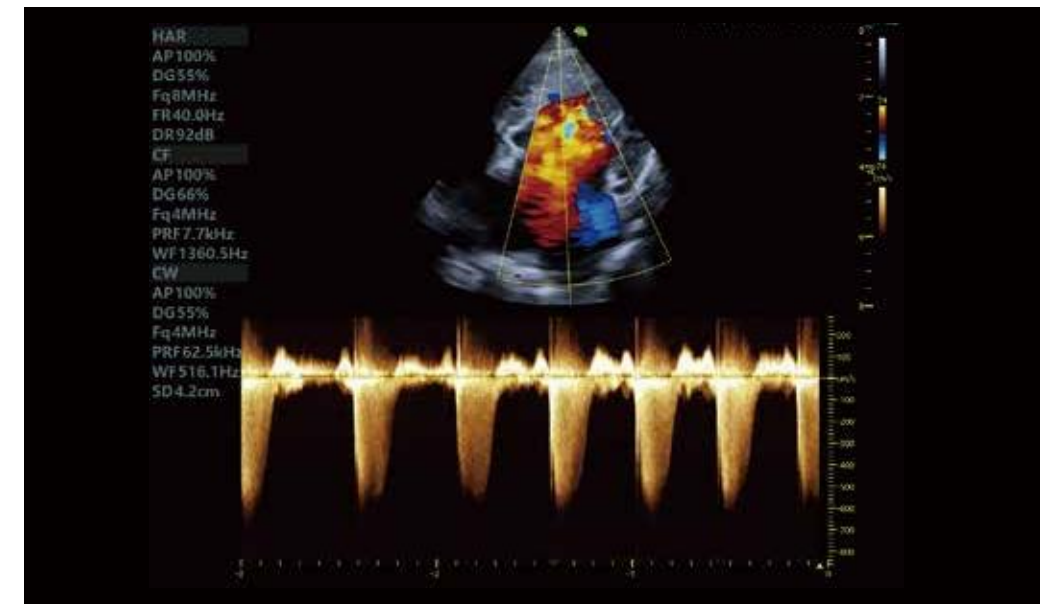

» Strain imagen

Imágenes de seguimiento del tejido miocárdico, herramientas de análisis en tiempo real integral y dinámico.

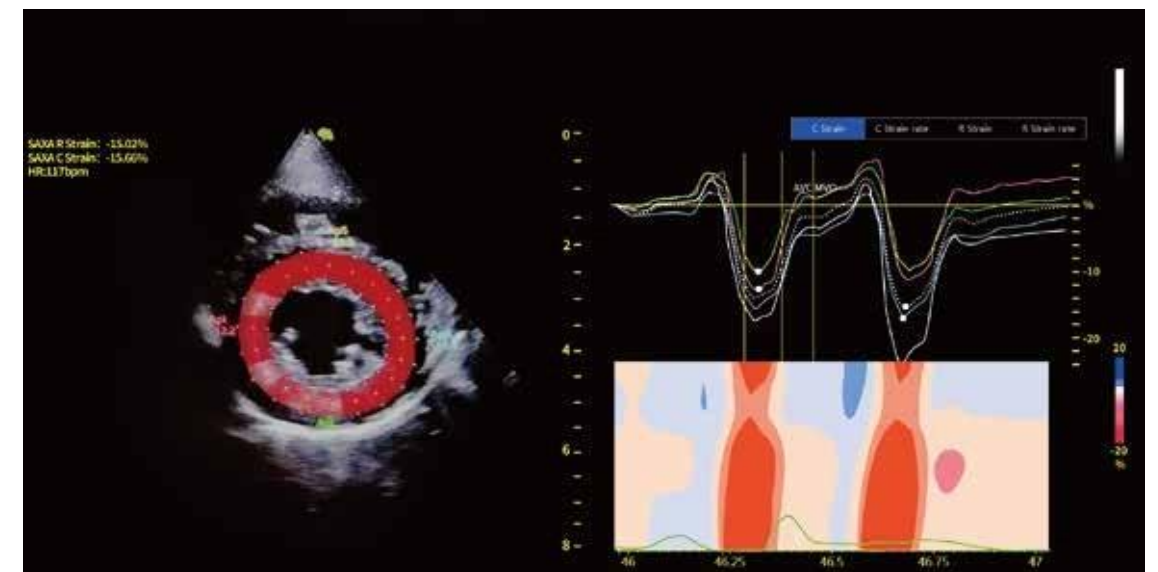

FLYINSONO Solución Remota

VINNO proporciona a los usuarios no sólo un sistema sólido de ultrasonido, sino también un plan de aprendizaje continuo de toda la vida. Regístrese por Capacitaciones Remotas con temas que le interesen para continuar aprendiendo.

Además, a nuestro grupo de servicio les encanta mucho ayudarle en servicio postventa de inmediato en línea. Gracias a FLYINSONO solución de VINNO, hacemos todo lo posible para maximizar el retorno de su inversión.



VINNO Sistema FLYINSONO

- Consultas en tiempo real
- Enseñanza remota

FLYINSONO

- Consulta de tiempo compartido
- Mantenimiento remoto



G2-5C Broadband Curved Array

- Aplicaciones: Abdomen, Repro, Ovario



F2-5C Broadband Curved Array

- Aplicaciones: Abdomen, Repro, Ovario



G4-12P Phase Array

- Aplicaciones: Cardiología



G1-4P Phase Array

- Aplicaciones: Cardiología, Abdomen



G3-10P Phase Array

- Aplicaciones: Cardiología



G3-10PX Phase Array

- Aplicaciones: Cardiología



G4-9M Broadband Curved Array

- Aplicaciones: Abdomen, Cardiología



X6-16L Broadband Lineal Array

- Aplicaciones: Abdomen, Tendón, Pequeñas partes, Ojos



X4-12L Broadband Lineal Array

- Aplicaciones: Abdomen, Tendón, Pequeñas partes, Ojos



G3-9M Broadband Curved Array

- Aplicaciones: Abdomen, Cardiología



X10-23L Broadband Lineal Array

- Aplicaciones: Abdomen, Tendón, Superficial



X3-10L Broadband Lineal Array

- Aplicaciones: Tendón



F4-12L Broadband Lineal Array

- Aplicaciones: Abdomen, Tendón, Pequeñas partes, Ojos



G4-12LV Broadband Lineal Array

- Aplicaciones : Repro

Galería de Imágenes

